


TrueSense kit 驅動程式安裝步驟

一、Download：從網站下載程式

- (一) 在桌面上新增一個資料夾（建議資料夾定名為“OPI”）。
- (二) 進入 www.op-innovations.com 網站，點選“APP 角落”，下載“OPI Console 及 SDK 下載”；將下載的 APP 儲存至新增的 OPI 資料夾。



- (三) 解壓縮下載的檔案。
 1. 打開 OPI 資料夾 → 點選 opiconsole_win_.....；

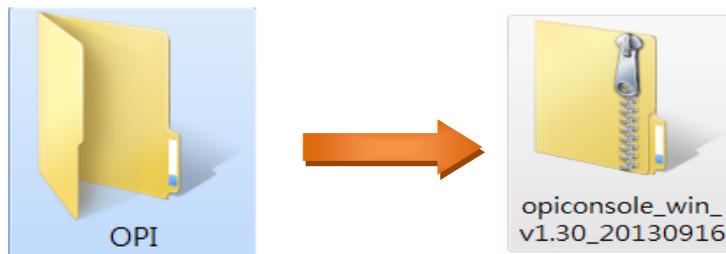


2. 按滑鼠右鍵 → 點選解壓縮；



3. 解壓縮完成；所有檔案皆在 OPI 資料夾中。

二、安裝趨動程式

- (一) 將 TrueSense 感測器、記憶體與控制器連結後插入電腦 USB 埠（注意：兩者的電池需相同方向）：點選“開始”功能鈕 → “控制台” → “硬體和音效”
（若電腦上無此選項，則直接點選“裝置管理員”）→ “裝置管理員”。

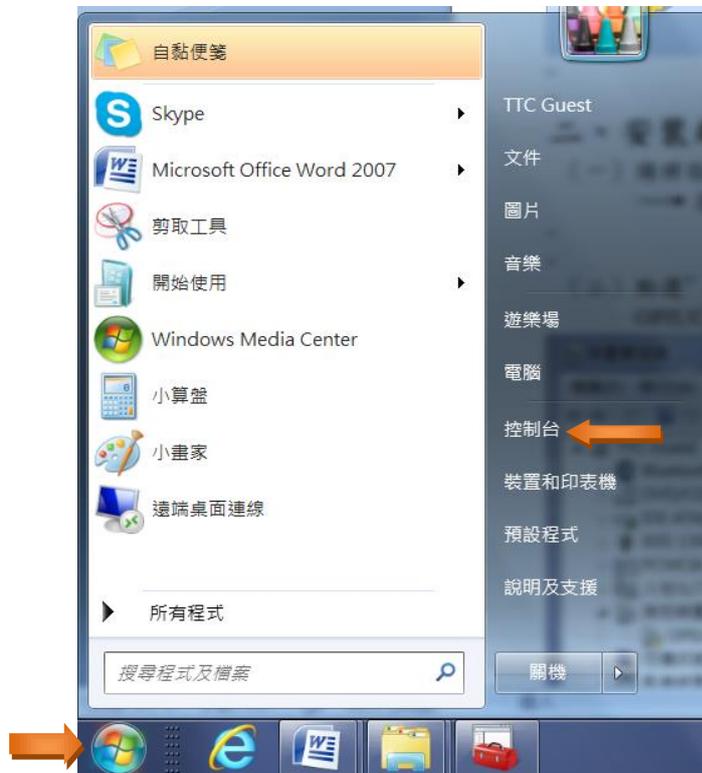

註：連結的方式


- (1) 若三者連結（感測器、記憶體與控制器）：則電池為同方向




- (2) 若二者連結（感測器、控制器）：則電池為反方向




(二) 點選“其他裝置”前的三角形後，下方將出現“OPIUCE”，快擊二下“OPIUCE”。

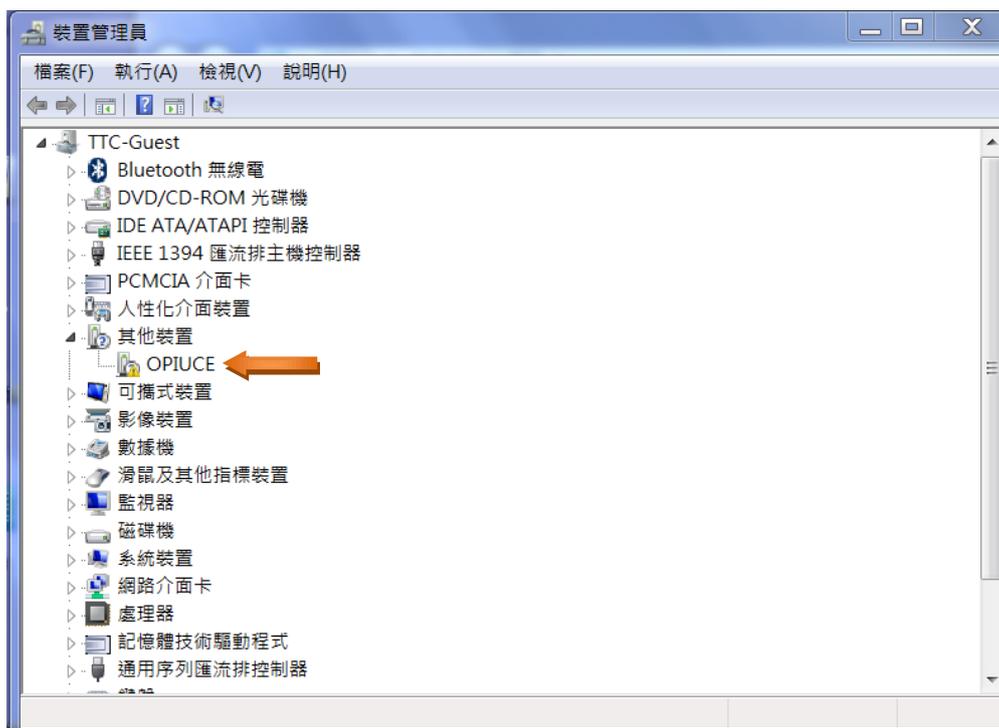


(三) 點選“趨動程式” → 點選“更新趨動程式” → “確定”。

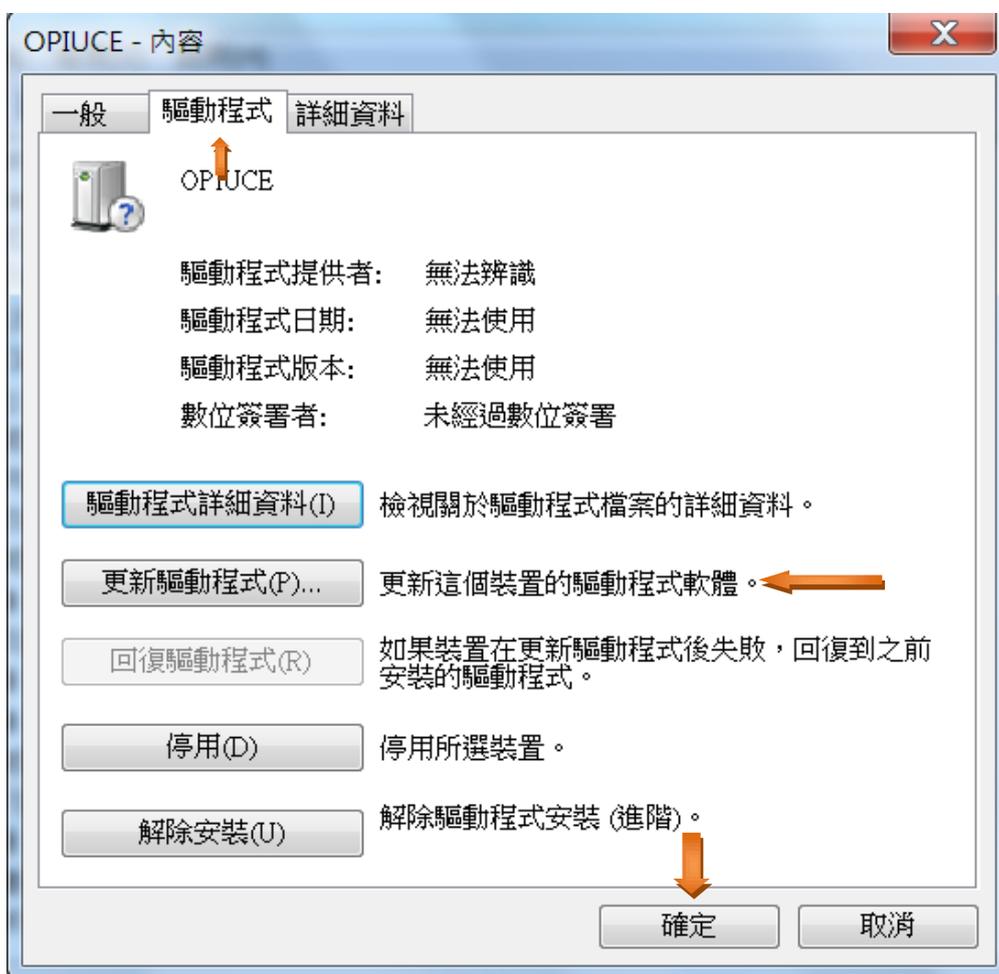

(四) 點選“瀏覽電腦上的驅動程式軟體(R)”。

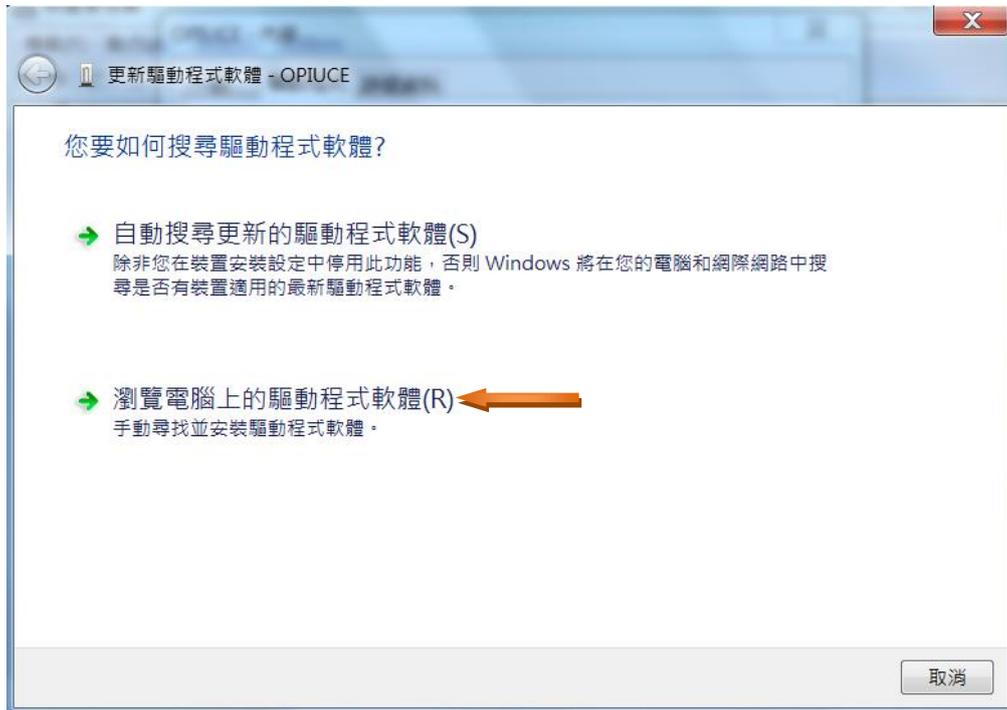


(五) 點選“瀏覽” → 打開 OPI 資料夾並點選其中的“win_usbedc_driver”資料夾 → “下一步”。

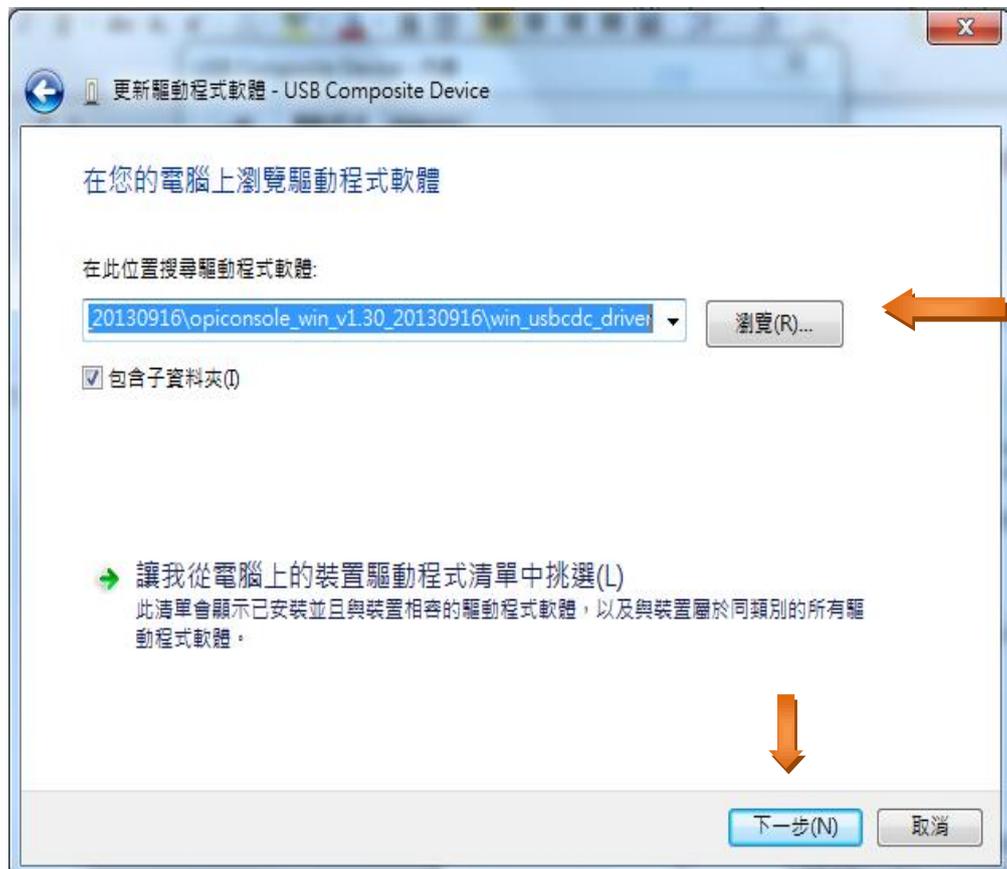


安裝過程中.....請稍待。

(六) 出現下列畫面後，請按“關閉”，趨動程式安裝完成。

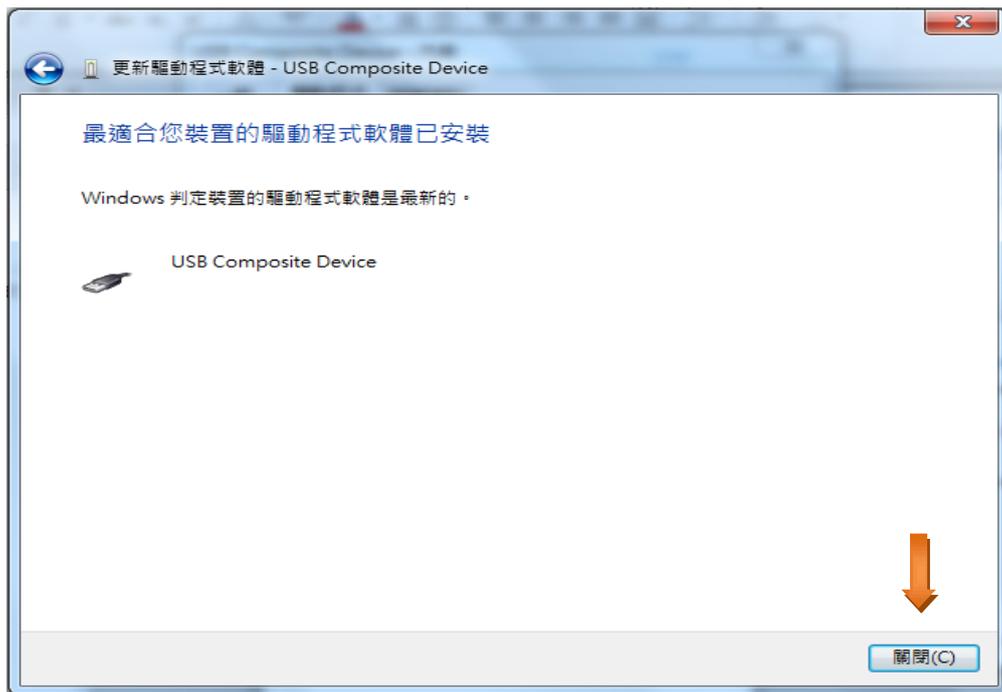


執行應用程式（可進入 www.op-innovations.com 網站，點選“OPI 產品→啟動-123”，觀看其中更詳細的操作短片）

（一）先打開 OPI 資料夾，再打開 opiconsole.....的資料夾。

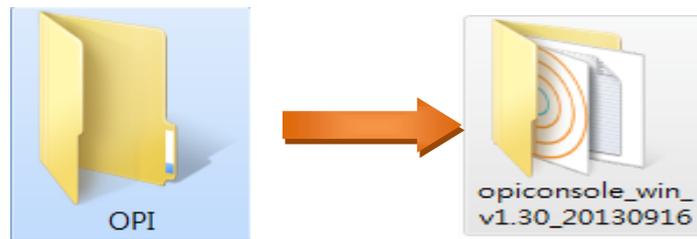

（二）感測器、記憶體及控制器仍插在電腦 USB 埠時，執行“OPIconsole.....exe”程式，（快擊二下）。

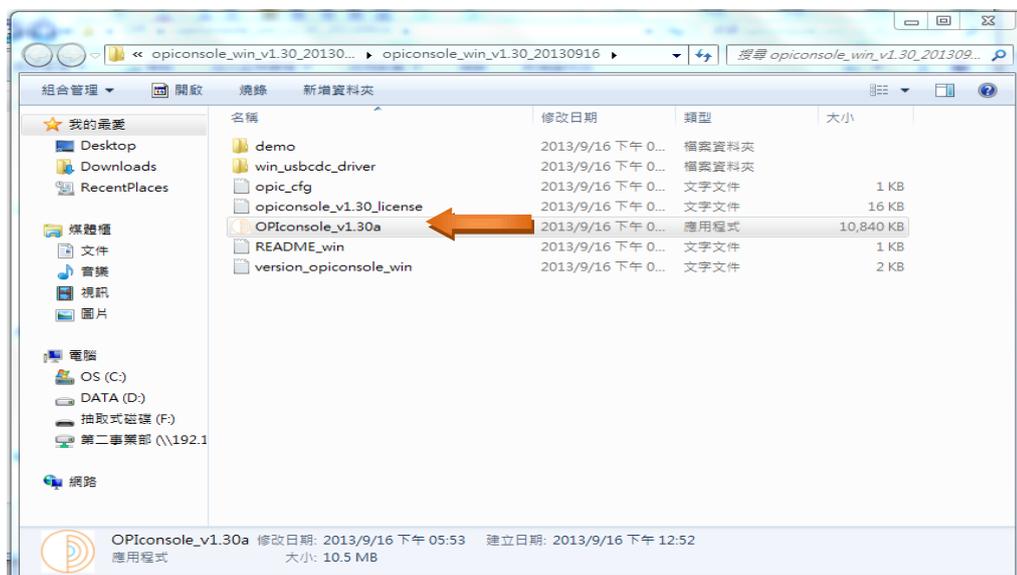

（二）執行的畫面。

